

# OLFY

## NOTICE D'UTILISATION

### **DISPOSITIF OLFY**



# Dispositif Olfy

---

## Guide d'utilisation

Mis à jour le

10/11/2022



Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations. Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez lui aussi ce mode d'emploi.

---

# SOMMAIRE

I	Présentation du dispositif Olfy.....	2
	Le dispositif Olfy en un coup d'oeil.....	2
	Liste des pièces à prévoir.....	4
II	Installation du dispositif sur le casque.....	5
	Étape 1 : Poser le boîtier sur le casque.....	5
	Étape 2 : Poser le boîtier diffusion à l'avant du casque.....	5
	Étape 3 : Brancher les deux boîtiers à l'aide du fil d'alimentation.....	5
	Étape 4 : Insérer les flacons à la main dans le boîtier diffuseur.....	6
III	Installation réseau du dispositif.....	8
	Étape 1 : Connection de votre casque vr au Wifi.....	9
	Étape 2 : Allumer le boîtier OLFY.....	10
	Étape 3 : Connecter OLFY au WIFI.....	11
IV	Maintenance et nettoyage du produit .....	13
	Boîtier de commande.....	14
	Boîtier diffusion.....	15
V	Précautions d'utilisations.....	16
	Fonction purge.....	18
	Conseils.....	18

# | Présentation du dispositif Olfy


Le dispositif Olfy vous permet d'ajouter la dimension olfactive aux expériences de réalité virtuelle. Cet accessoire simple et innovant est adaptable à tous les casques de réalité virtuelle.



**Remarque :** Ce guide présente les opérations, le nettoyage et dépannage de base, ainsi que les informations pour contacter le service assistance et commander des fournitures.

## Le dispositif Olfy en un coup d'oeil

Ces pièces sont fournies en kit par la société Olfy

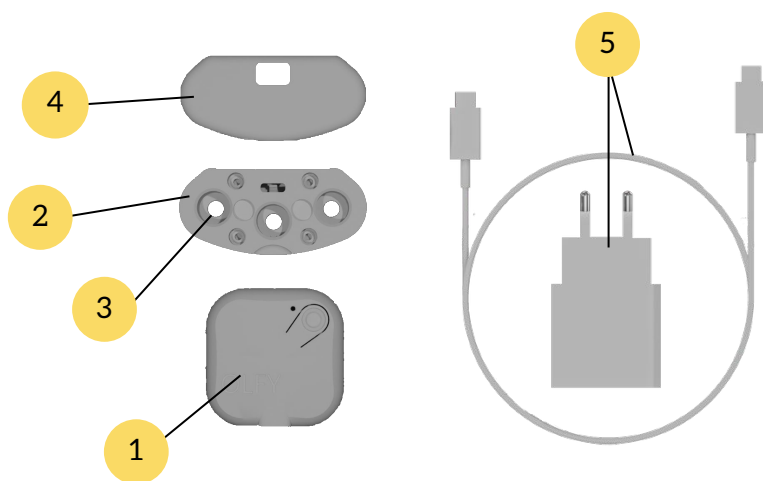

1. Batterie, interrupteur **ON/OFF** avec indicateur lumineux, x1
2. Diffuseur, x1
3. Fioles, x 3
4. couvercle, x1
5. Cordon d'alimentations (USB-C)

## Batterie



1. Interrupteur **ON/OFF** : permet de mettre le dispositif Olfy sous tension ou hors tension. Pour couper totalement l'alimentation, mettez l'accessoire hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation.

2. Indicateur lumineux (Rouge, Jaune, Vert ou Bleu)

3. Port USB-C pour recharger l'accessoire mais également pour connecter la batterie au diffuseur.



**Attention : pour charger la batterie, munissez-vous d'un chargeur qui n'est pas Power Delivery. (Charge rapide) sinon le boîtier ne se rechargera pas.**

## Diffuseur



1. Port USB-C pour connecter le diffuseur à la batterie/commande

2. Couvercle

3. Fioles (de 1 à 3)

## Parfums



x1 Entonnoirs pour chaque fiole



x1 Flacon de senteurs de 15 ml par  
parfum(s) et/ou d'huile(s) essentielle(s)

## Liste des pièces à prévoir



**Conseil** Ces pièces ne sont pas fournies avec l'accessoire Olfy, il est fortement conseillé de vous munir :

1. D'un casque de réalité virtuelle et ses manettes (Oculus, Vive...)
2. D'un flacon d'alcool (à 90° pharmaceutique ou ménager)
3. De cotons tiges.
4. Attache fil alimentation

# Installation du dispositif sur le casque

## 1 ETAPE 1

Posez le boîtier batterie avec la partie adhésive sur le casque



**Remarque** Vous pouvez poser la batterie aussi bien à l'avant, qu'à l'arrière, ou sur le côté du casque de réalité virtuelle.

## 2 ETAPE 2

Posez le boîtier diffusion sur la partie adhésive à l'avant du casque.



**Remarque** Veillez à le positionner sur le bas du casque de réalité virtuelle afin d'être au plus proche du nez de l'utilisateur.



**Attention** Assurez-vous que le diffuseur ne cache pas une caméra du casque de réalité virtuelle.

## 3 ETAPE 3


Branchez les deux boîtiers à l'aide du fil d'alimentation USB-C




**Remarque : Vous** pouvez ajouter des attaches sur le casque de réalité virtuelle pour stabiliser le fil d'alimentation.



1

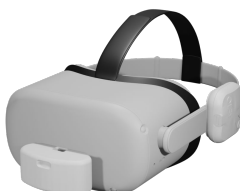

2

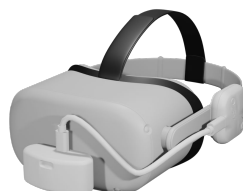

3

#### ETAPE 4

Insérez les flacons à la main dans le boîtier diffuseur

Une fois les flacons constitués de leur senteur, ouvrez le couvercle du diffuseur puis insérez délicatement les flacons dans les emplacements prévus.



**Conseil** Pour faciliter la manipulation, il est préférable d'ajouter les fioles dans le diffuseur après avoir posé le diffuseur sur le casque de réalité virtuelle.



Répétez l'opération avec les autres flacons puis fermer le couvercle.



**Remarque** : les flacons en verre sont constitués d'un bouchon et d'un coton, veuillez à retirer le bouchon pour l'intégrer dans le diffuseur.





# III Installation réseau du dispositif



**Remarque** : La connexion de la batterie OLFY au réseau est une opération à effectuer qu'une fois. Il n'est pas nécessaire d'effectuer les opérations suivantes pour chaque mise en tension, l'accessoire se connectera automatiquement.

## ETAPE 1

Connectez le casque de réalité virtuelle au Wifi



**Conseil** : Vérifiez les paramètres wifi de la marque du casque de la réalité virtuelle

## ETAPE 2

Connectez le boîtier commande au Wifi :

Allumez le boîtier en appuyant sur le bouton ON/OFF

Par défaut OLFY émet son propre wifi et ce dernier clignote avec une LED jaune.



## ETAPE 3

Connectez le boîtier "commande" à l'adresse IP transmise par la société OLFY dans le document API.

Explication décrite en P9.



**Remarque** : Pour changer de wifi, il suffit de rester appuyé 5 secondes sur le bouton du boîtier. Une fois cette manipulation effectuée, il faut de nouveau effectuer les étapes décrites précédemment avec le nouveau réseau wifi.

# Signification LED

## Rouge : allumé - non connecté

Lorsque la batterie est allumée mais non connectée au réseau Wifi, un clignotement rouge apparaît. Cela signifie qu'il cherche le wifi précédemment connecté.



## Rouge : problème logiciel ou matériel

Lorsqu'il y a un problème de logiciel ou de matériel, un voyant fixe rouge apparaît.

Dans ce cas, éteignez et redémarrez le boîtier.

Si le problème persiste contacter le support OLFY.



## Jaune : allumé - mode hotspot



## Vert : connecté - réseau wifi



## Bleu : en recharge

Pour vérifier que le boîtier est bien en charge, veuillez l'allumer.



## Blanc : Connecté et USB brancher



**Remarque :** Vous pouvez recharger la batterie sous tension ou hors tension.

# Connexion adresse IP



**Remarque :** Pour envoyer l'information de diffusion, il vous faut connecter le boîtier commande avec une adresse de Protocole Internet, qui vous est fournie par la société OLFY.

## ETAPE 1

Alumez

OLFY.

Connectez OLFY-AP à l'adresse IP suivante : <http://192.168.4.1>.

Connection WIFI: OLFY-AP

Password : olfy12345678

IP address : 192.168.4.1




## ETAPE 2

Allez sur la page internet correspondante à l'adresse IP qui vous à été transmise.

Cette page va scanner et afficher tous les réseaux présents dans l'environnement.

Ensuite, sélectionnez votre réseau

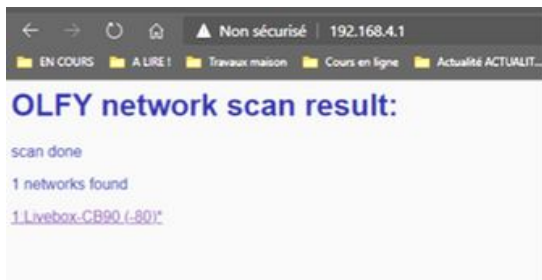

### ETAPE 3

- renseignez le mot de passe du réseau
- cliquez sur valider.


Le système OLFY redémarre et se connecte au réseau.



### ETAPE 4

Lorsque OLFY est connecté au réseau, un message de confirmation s'affiche.

Puis la led passe par toute les couleur avant de se stabiliser sur le vert, puis le blanc une fois l'USB-C brnaché.

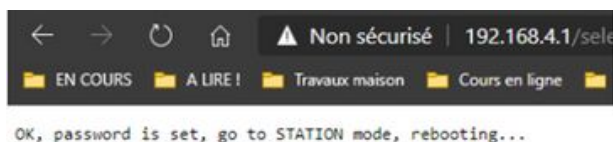

# IV Nettoyage et maintenance



**Attention** : Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

## Boîtier de commande

La batterie se recharge à l'aide d'un fil d'alimentation de type USB-C branché sur un chargeur secteur.

Si vous n'utilisez pas OLFY, vous pouvez le ranger dans la boîte.

## Boîtier de diffusion

### ETAPE 1

Mettez la batterie hors tension (bouton OFF)

### ETAPE 2

Débranchez la partie diffusion du fil d'alimentations relié à la batterie, puis retirez le boîtier de diffusion du casque afin de faciliter la manipulation

### ETAPE 3

Munissez vous d'un coton tige imbibé d'alcool pharmaceutique puis nettoyez les membranes (dessous et au-dessus)



**Conseil** : Il est conseillé de vous laver les mains après le nettoyage du diffuseur ou de nettoyer directement avec une paire de gants que vous changerez à chaque manipulation de flacon.



**Conseil** : Il est recommandé de procéder au nettoyage et de retirer et ranger les flacons séparément après chaque utilisation, afin d'éviter toute pollution d'odeurs.



# V Précautions d'utilisations

## Fonction purge

Si vous changez de parfum, vous devez réaliser la fonction « purge » afin de retirer la totalité de l'odeur précédente.

Pour cela, vous devez mettre un flacon rempli d'alcool pharmaceutique et lancer la commande purge.

Cette dernière s'effectue en appuyant 2 sec enfoncé le bouton sur le boîtier.

## Conseils :



**Conseil** : Il est recommandé d'utiliser le même flacon sur le même emplacement de diffusion, afin d'éviter tout mélange d'odeurs.



**Conseil** : Il est également préférable de recharger le parfum dans un flacon vide ayant précédemment contenu la même odeur.



**Conseil** : Il est conseillé de ranger l'accessoire Olfy dans son emballage, dans un endroit sec.

# 2 COMPOSITION DES PARFUMS

## Composition d'une fiole de parfums



**Remarque** : Pour la composition d'une fiole de parfums, veuillez à respecter les indications suivantes. Si, les indications ne sont pas respectées, le dispositif risque de ne pas se déclencher.

Le dispositif fonctionne uniquement avec les parfums prévus dans le devis et présent dans le coffret.



**Attention** : Si la composition change, le dispositif ne pourra pas déclencher la diffusion des odeurs car elles ne sont pas adaptées.

## Recharge parfums

Pour recharger votre fiole de parfums munissez vous du/des parfums en bouteille; des fioles vides, d'un entonnoir et d'une pipette.

Versez le contenu de la bouteille de parfum dans la fiole à l'aide de l'entonnoir ou de la pipette.

## Commande des fioles de senteurs

Si vous souhaitez obtenir des parfums déjà existants, référez vous au support d'Olfy. Si vous voulez une odeur particulière, il faudra dans ce cas faire un appel à la société Olfy qui pourra se rapprocher de ses prestataires afin de créer le parfum que vous désirez.

## Commande des fioles vides rechargeables

Si vous souhaitez commander de nouvelles fioles vides pour procéder à une composition de parfum, retrouvez en page n°..... Les références correspondantes aux spécifications du diffuseur.

## Commander des parfums spéciaux

Si vous voulez une odeur particulière, il faudra dans ce cas faire un appel à la société Olfy qui pourra se rapprocher de ses prestataires afin de créer le parfum que vous désirez.



# 3 DEPANNAGE ET ASSISTANCE

Ce chapitre contient des informations de dépannage relatives à l'accessoire Olfy. Il fournit notamment des renseignements sur les problèmes liés à l'installation, à la configuration et à certains aspects de l'utilisation. Pour plus d'informations sur le dépannage, contacter la société.

Dépannage des problèmes courant rencontrés pendant l'installation :

- Réseau wifi trop faible
- Fiole(s) de diffusion mal positionnée(s)
- Batterie épuisée

Dans ce cas, procédez comme suit :

1. Débrancher le câble USB-C de la batterie et du dispositif
2. Déconnectez le wifi de votre ordinateur
3. Redémarrez votre ordinateur
4. Mettez la batterie hors tension, attendez quelques minutes, puis redémarrez le
5. Retirez toutes les fioles de leur position
6. Procédez à un nettoyage complet du diffuseur
7. Positionner les fioles en respectant bien le numéro de position, veillez à bien refermer le couvercle
8. Connectez de nouveau la batterie au wifi et entrez l'adresse API d'accès
9. Lancez la vidéo ou le contenu immersif



**Conseil** : Vous pouvez tester manuellement la diffusion depuis votre ordinateur sur chaque sortie de fiole de parfums avant de lancer le contenu immersif.

# Avant d'appeler l'assistance clientèle

Procédez aux opérations suivantes :

1. Assurez-vous que :
  - a. La batterie Olfy est correctement branchée au diffuseur et sous tension
  - b. Les fioles de senteurs sont bien installées
  - c. Le codage pour l'envoi de l'information pour diffusion est bien renseigné
2. Re-Configurez l'appareil Olfy

## Contactez l'assistance

Pour plus d'informations contactez le support au [contact@olfy-official.com](mailto:contact@olfy-official.com)

Dans votre mail, veuillez à renseigner tous les éléments suivants :

- Dénomination de votre société
- Votre Nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone
- Date d'acquisition et n° de commande
- Décrivez le problème rencontré en détail ainsi que vos essais de dépannage
- Relevez le numéro de série (qui vous sera fourni à la commande)



**Conseil** En indiquant le maximum d'informations vous permettrez à l'assistance de répondre au mieux à votre demande.



**Conseil** Tenez vous à proximité de l'appareil Olfy pour faciliter l'échange avec l'assistance lorsqu'elle vous recontactera

# Garantie

La durée de garantie de l'accessoire Olfy débute à compter de la date d'achat du consommateur. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

Sont couverts toutes pannes ou défauts, rendant le produit impropre à son usage, et entraînant un retour de produit par le consommateur pendant la durée de garantie.

Sont exclus de la garantie, tous dommages, pannes, défaillances ou défauts liés :

- À un emploi ou une installation non conforme aux prescriptions indiquées dans la notice fournie
- Aux dommages résultant d'une cause externe au produit.
- À la suite d'une modification des caractéristiques techniques par l'utilisateur
- A une utilisation à caractère personnel et non professionnelle
- Aux pièces dites de consommation ou d'usures (ex : fil d'alimentation, flacon et fioles de parfums...)

La garantie n'est applicable qu'avec la SAS Olfy. Dans l'éventualité d'un problème ou défaut, vous devez toujours vous rendre à la société Olfy pour pouvoir bénéficier de la couverture de la garantie.

Toute demande de SAV ne pourra être traitée que si :

- Une preuve d'achat est fournie (facture)
- Le produit est strictement identique à celui acheté.

Pour toute information complémentaire, la société Olfy se tient à votre disposition.

Olfy

06 80 46 97 95

[contact@olfy-official.com](mailto:contact@olfy-official.com)

[www.olfy-official.com](http://www.olfy-official.com)

## Notes

[illegible]